


HIP System für Pflegeeinrichtungen



Bettwäsche, Schutztextilien und Wäschereilösungen

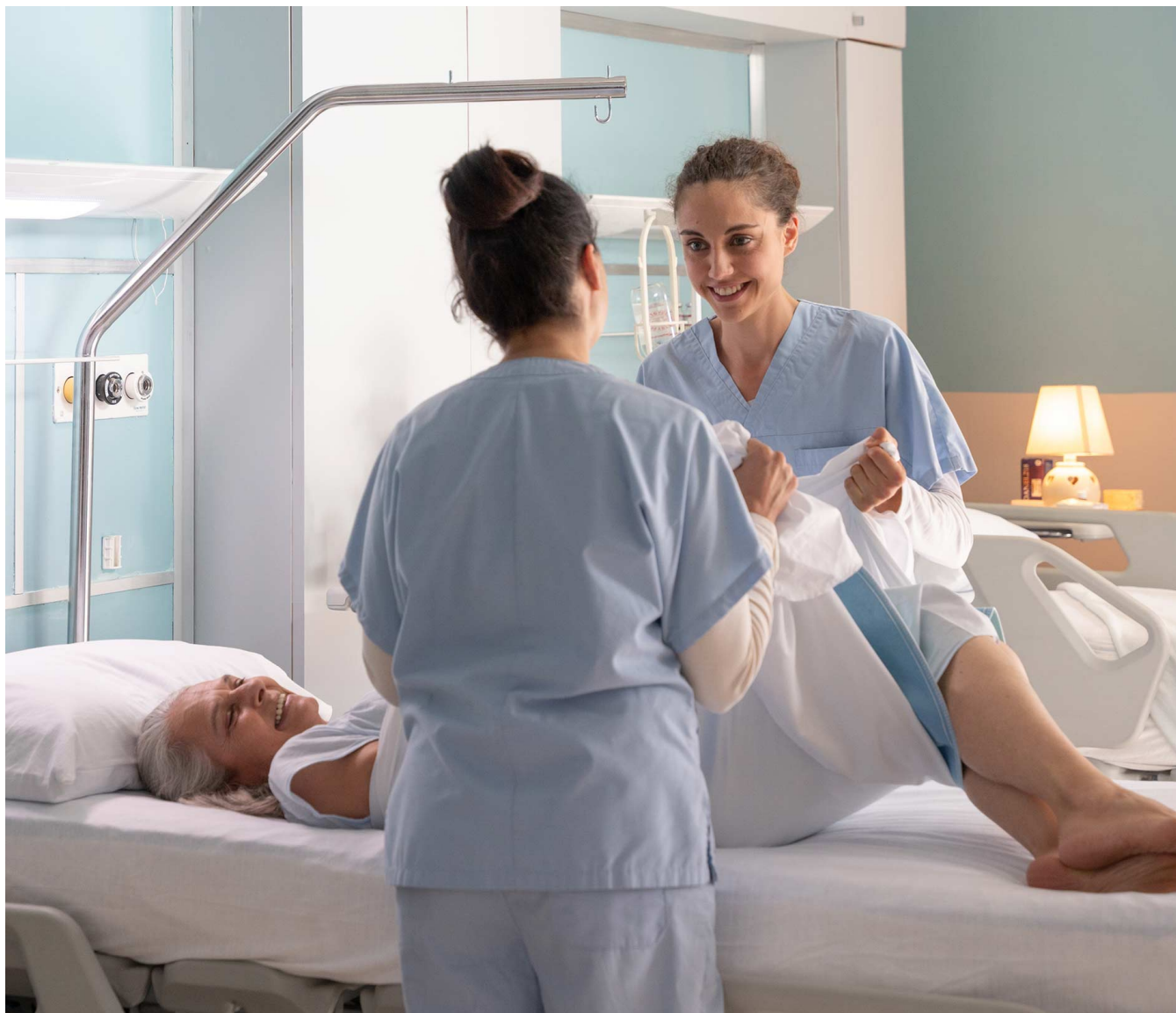

Jedes Textil zählt.

Gesamtsortiment für Einrichtungen • Deutsch

Weinem Kft. | wnkft.hu | info@wnkft.hu

Das richtige Produkt für die richtige Aufgabe

Komfort für die Bewohner und Textilmanagement der Einrichtung in einem System.

Kapitel	Inhalt	Seite
Bettssystem	Laken, Kissenbezug, Systemdarstellung	3-4
Matratzen- und Kissenschutz	Schutzbezüge und Ausführungen	5-6
Inkontinenzunterlagen	Auswahltabelle und acht Varianten	7-10
Decken	ThermoCare und ThermoQuilt	11-12
Essplatz und Kleidungsschutz	Drei Materialfamilien, Taschenvarianten	13-14
Pflegehilfsmittel	Waschhandschuh, Schürze, Scivola	15-16
Textilsammlung	Säcke, wasserlöslicher Sack, Stella Wagen	17-18
Pflege	Produktspezifische Waschübersicht	19
Wäschewagen	Aluminiumwagen und Rollcontainer	20-22
Bestellung und Kontakt	Anfrage, Quellen, Weinem	23-24

Drei Angaben erleichtern die Auswahl

- Einsatzort: Bett, Sitzfläche, Mahlzeit oder Wäschereitransport.
- Größe und Ausführung: Einsteckflügel, Verschluss, Tasche oder Wagentyp.
- Örtliche Wäschereitechnologie: Temperatur, Chemikalien, Trocknung.

Das HIP Bettsystem

Wählen Sie die aufeinander abgestimmten Elemente nach den Bedürfnissen des Bewohners.



Decke

Oberlaken

Unterlage

Unterlaken

Matratzenschutz

Schematische Schichtenfolge,
nicht maßstabsgetreu.

- 1 Matratzenschutz**

Zwischen Matratze und Laken; schützt die Matratzenoberfläche.
- 2 Unterlaken**

Weiche, an die Matratze angepasste Liegefläche.
- 3 Inkontinenzunterlage**


Ergänzt die Bettwäsche im benötigten Bereich; Ausführung je nach Anwendung.
- 4 Oberlaken und Decke**

Zum Zudecken und für den Wärme komfort des Bewohners.
- 5 Kissenschutz und Kissenbezug**

Der Schutzbezug schützt das Kissen; der äußere Bezug dient dem Komfort.

Laken und Kissenbezug

Jersey-Bettwäsche für die Betausstattung in Einrichtungen.

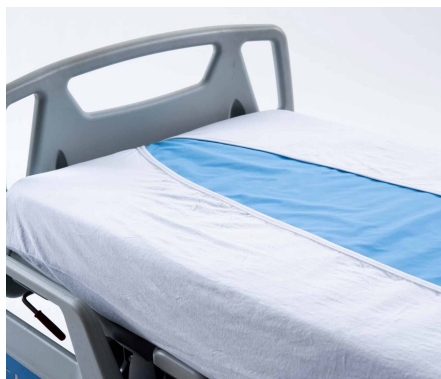

Unterlaken • HIPE131

Das Jerseygestrick und die angepasste Eckenkonstruktion erleichtern das Aufziehen auf die Matratze. Laut Hersteller ist kein Bügeln erforderlich.


Angabe	Ausführung
Matratzengröße	180-190 × 85-90 × 10-20 cm
Pflege	Waschen bis 60 °C; mittlere Trocknung



Oberlaken • HIPE11S

Die doppelte Eckenkonstruktion am Fußende lässt mehr Platz für die Füße und erleichtert das Bettenmachen.

Angabe	Ausführung
Matratzengröße	180-195 × 85-90 × 10-20 cm
Pflege	Waschen bis 60 °C; kein Bügeln

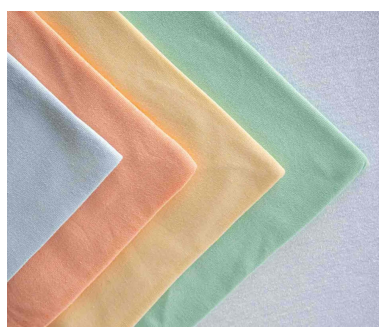

Kissenbezug • HIPC41

Weicher, natürlich elastischer Jersey-Kissenbezug mit Einschlag.

Angabe	Ausführung
Herstellermaß	50 × 75 × 15 cm
Pflege	Gemäß Etikett und örtlichem Verfahren

Matratzenschutz

Luce und NF Breath: Auswahl nach Matratze und Wäschereiverfahren.



NF Breath • HIPC09

PU-beschichtetes Polyester, wasserdicht und atmungsaktiv.



Luce • HIPC10

Matratzenschutz aus Polyurethan für verschiedene Größen.

Eigenschaft	NF Breath	Luce
Matratze / Größe	Bis 195 × 90 × 20 cm	85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm
Material	Polyurethanbeschichtung auf Polyester	Polyurethan
Waschen	Bis 95 °C	Bis 95 °C
Chemikalien	Sauerstoffmittel; kein Hypochlorit	Sauerstoffmittel; Chlorbleiche vermeiden
Trocknung	Möglichst mittlere Temperatur	Gemäß Produktetikett

Zertifikate für die konkrete Ausführung

NF Breath: Der Hersteller nennt OEKO-TEX® Standard 100 und die italienische Classe I. Luce: Das Datenblatt nennt eine flammhemmende PU-Ausführung. Fordern Sie das aktuelle Zertifikat des konkreten Produkts an.

Vollschutz und Kissenschutz

Matratzen- und Kissenschutz sind separate Produkte und ergänzen die äußere Bettwäsche.



Luce Totalizzato • HIPC10TOT

Vollständiger Matratzenschutz aus dem NF/Breath-PU-Material des Herstellers. Auf der Website wird diese Variante auch Luce Respiro genannt.

Angabe	Ausführung
Größe	85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm
Farben	Weiß und Hellblau
Pflege	Bis 95 °C; Sauerstoffmittel; kein Hypochlorit



Salvaguardiale • Kissenschutz

Wasserdichter Schutzbezug aus Polyurethan für Kissen. Das Herstellerdatenblatt führt getrennte PU- und PVC-Varianten auf; das Material wird bei der Bestellung festgelegt.

Angabe	Ausführung
Maß laut Website	80 × 49 cm
Datenblattnummern	HIPC07: PU; HIPC02: PVC
Pflege	PU: bis 95 °C; Chlorbleiche vermeiden

Weitere Datenblattvarianten auf Anfrage

HIPC32: Matratzenschutz 0417 aus PVC. HIPC20: Matratzenschutz Base aus PVC, laut Datenblatt ein Auslaufmodell. Maße und aktuelle Verfügbarkeit werden gesondert abgestimmt.

Welche Unterlage passt?

Acht Varianten für Einrichtungen mit unterschiedlichen Größen und Anwendungen.

Typ	Größe (cm)	Auswahlkriterium
LX-2016, ohne Flügel	90 × 75	Bett; lokaler Schutz
LX-2016, mit Flügeln	90 × 75 / gesamt: 180 × 75	Einsteckbare Seitenflügel
BB-1, ohne Flügel	90 × 85	Größere Kernfläche
BB-1, mit Flügeln	90 × 85 / gesamt: 180 × 85	Größere Fläche und Einsteckflügel
04190 NF	90 × 85; Gesamtmaß abstimmen	Polycotton + PVC
Big Blue	100 × 120 / gesamt: 200 × 120	Großflächige Unterlage
Flat	90 × 75	Glatte, integrierte Struktur
LX-2016 für Sitzflächen	40 × 35	Stuhl, Sessel, Rollstuhl

Kernfläche und Gesamtmaß

Bei Unterlagen mit Flügeln sind die saugfähige Kernfläche und die Gesamtbreite einschließlich der einsteckbaren Flügel separate Angaben. Bei Varianten ohne Flügel entspricht das Gesamtmaß der Kernfläche.

Für die Auswahl benötigen wir Matratzengröße, Anwendung und Wäschereiverfahren. Der Bedarf an Flüssigkeitsaufnahme wird gesondert abgestimmt.

LX-2016 Unterlagen

Varianten mit und ohne Flügel bei gleicher Kernfläche.



Ohne Flügel • HIPA40

90 × 75 cm. Weiche Soft Skin® Kontaktfläche.




Mit Flügeln • HIPA39


Kernfläche: 90 × 75 cm. Gesamt: 180 × 75 cm.
Seitenflügel aus Polycotton.

Maßvergleich der beiden Ausführungen

Ohne Flügel

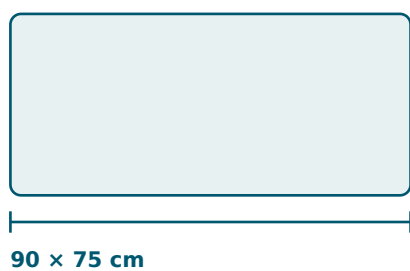

Mit Flügeln: 180 × 75 cm

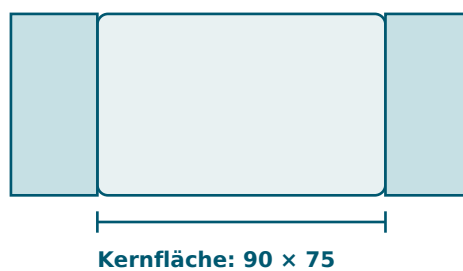

Pflege und Anwendung

- Laut Hersteller wasserdicht, atmungsaktiv und waschbar.
- Waschen bis 95 °C; Waschmittel auf Sauerstoffbasis. Chlorbleiche vermeiden.
- Für längere Haltbarkeit der PU-Unterlagen empfiehlt der Hersteller einen Waschwasser-pH unter 10.
- Trocknergeeignet; Programm gemäß Etikett verwenden.

BB-1 Unterlagen

Kernfläche von 90 × 85 cm mit zwei Befestigungsvarianten.



Ohne Flügel • HIPA37

Gesamtmaß: 90 × 85 cm.



Mit Flügeln • HIPA36

Kernfläche: 90 × 85 cm. Gesamt: 180 × 85 cm.

Größere Kernfläche


Die Kernfläche der BB-1 ist in einer Richtung 10 cm größer als die der LX-2016. Berücksichtigen Sie die zu schützende Fläche, die Position des Bewohners und den Bedarf an einsteckbaren Flügeln.

Eigenschaft	BB-1
Kontaktfläche	Soft Skin®
Ausführung mit Flügeln	Polycotton-Seitenflügel
Waschen	Bis 95 °C; Sauerstoffmittel
Chlorbleiche	Vermeiden
Trocknen / Bügeln	Trocknung gemäß Etikett; kein Bügeln

Varianten mit und ohne Flügel sind bei der Bestellung getrennt anzugeben.


Spezielle Unterlagen

Große Fläche, PVC-Barriere, glatte Struktur oder Verwendung auf Sitzflächen.

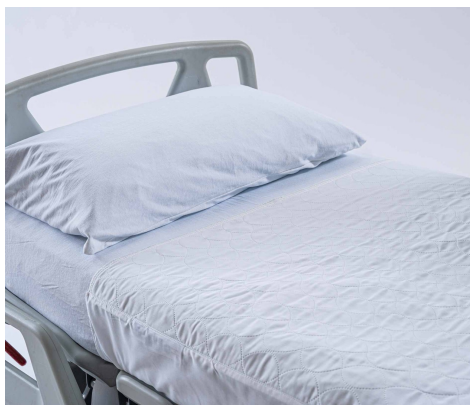

04190 NF • HIPA02-1

Polycotton-Oberfläche und PVC-Barriere. Kernfläche: 90 × 85 cm. Gesamtmaß mit Flügeln abstimmen. Waschen bis 90 °C.

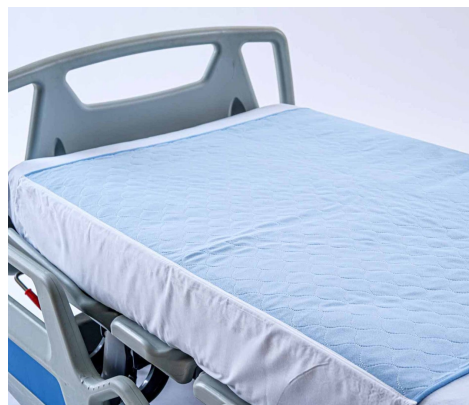

Big Blue • HIPA33

Kernfläche: 100 × 120 cm; gesamt: 200 × 120 cm. Gewicht: 890 g. Soft Skin® Oberfläche. Waschen bis 95 °C.



Flat • HIPA47

90 × 75 cm. Glatte, integrierte Struktur; ohne Flügel. Waschen bis 95 °C; keine Chlorbleiche.




LX-2016 für Sitzflächen

40 × 35 cm; 72 g. Für Stuhl, Sessel oder Rollstuhl. Waschen bis 90 °C; Mittel auf Sauerstoffbasis.

Weitere Datenblattmodelle: Base 01 Square (HIPA17SQR), PVC Rosa (HIPA48), Infinity (HIPA45), Silver bio (HIPA19CA; Auslaufmodell), 04190 NF ohne Flügel (HIPA07A). Details und Verfügbarkeit auf Anfrage.

ThermoCare

Decke mit Zellstruktur für den Einsatz in Einrichtungen.

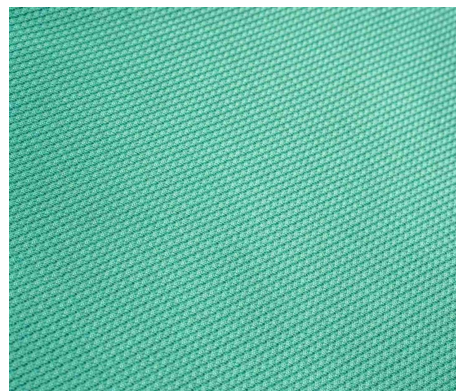


Wärmekomfort und einfache Pflege

Der Hersteller hat die textile Zellstruktur zur Unterstützung des Wärmekomforts entwickelt. Die Decke ist weich, leicht und muss nicht gebügelt werden.

Angabe	ThermoCare
Artikelnummerfamilie	HIPC33...
Größe	155 × 235 cm
Farben	Hellblau, Gelb, Grün, Cyclamen, Lachs
Herstellerverpackung	10 Stück
Trocknung	Bis 60 °C; gemäß Etikett
Flammhemmung	Italienische Classe I; Zulassung laut Herstellerdatenblatt

ThermoQuilt

Gesteppte Decke aus FR-Polyesterfasern.

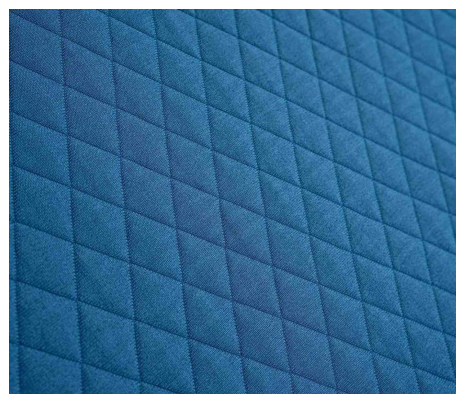



Gesteppte Ausführung

Aus 100 % Polyester mit flammhemmenden FR-Fasern. Kein Bügeln erforderlich. Sondergrößen und weitere Farben auf Anfrage und nach Abstimmung mit dem Hersteller.

Angabe	ThermoQuilt
Artikelnummer	HIPC46AZZ: Hellblau; HIPC46BCR: Capri-Blau
Größe	152 x 235 cm
Flächengewicht	450–490 g/m ²
Herstellerverpackung	7 Stück
Trocknung	Bis 60 °C; gemäß Etikett
Flammhemmung	Italienische Classe I laut Herstellerdatenblatt

Esslatz und Kleidungsschutz

Picasso, Oceano und Mikrofrottier: drei Oberflächen ohne Auffangtasche.

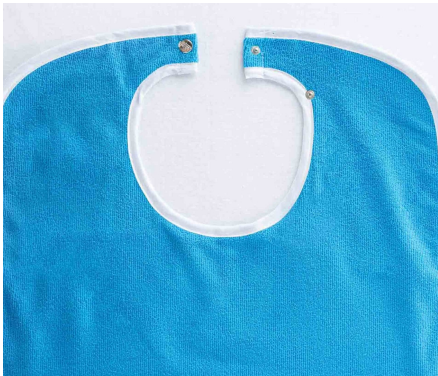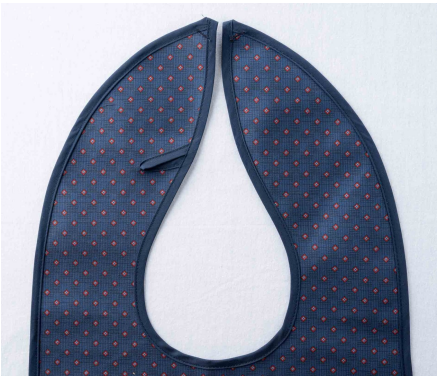

Picasso

Oceano

Mikrofrottier

Variante	Oberfläche / Barriere	Größe (cm)
Picasso	Polyester + PVC	Druckknopf: 45 × 90; Rabbit: 45 × 102
Oceano	Polyesterfrottier + PVC	Druckknopf: 45 × 90; Rabbit: 45 × 100
Mikrofrottier	Mikrofaserfrottier + PVC	48 × 90


Befestigung und Größe

Der Hersteller bietet Druckknopf- und Rabbit-Verschlüsse; eine Variante mit Bindebändern ist auf Anfrage möglich. Sondergrößen können abgestimmt werden. Die vollständige Artikelnummer richtet sich nach Verschluss, Farbe und Ausführung.

Waschen bis 60 °C. Picasso: keine Chlorbleiche. Die übrigen Ausführungen gemäß Produktetikett pflegen.

Esstanz mit Auffangtasche

Für alle drei Materialfamilien ist eine separate Variante mit Tasche erhältlich.

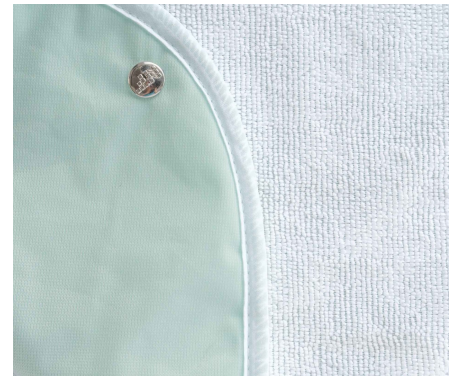

Picasso • mit Tasche

Oceano • mit Tasche


Mikrofrottier • mit Tasche

Sechs Produktvarianten mit gemeinsamen Auswahlkriterien

Esstanz mit und ohne Tasche sind bei der Angebotsanfrage getrennt anzugeben. Die Website nennt für Taschenvarianten die gleichen Familienmaße wie auf der vorherigen Seite.



Druckknopfverschluss

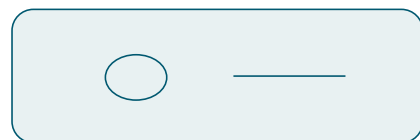

Rabbit-Verschluss

Schematische Verschlussdarstellungen; die tatsächliche Konstruktion hängt vom gewählten Produkt ab.

Trocknungshinweis: Die Website nennt für Esstanz ein Programm mit maximal 40–50 °C für 15–20 Minuten. Das genaue Programm ist anhand des Etiketts und der Wäschereitechnologie abzustimmen.

Waschen und Kleidungsschutz

Zwei Zubehörartikel mit unterschiedlichen Materialien und Pflegevorgaben.

Waschhandschuh • HIPE01

Weißer Waschhandschuh aus Mikrofaserfrottier. Das Herstellerdatenblatt nennt eine elastische Fixierung am Handgelenk.



Angabe	Ausführung
Größe	Ca. 22 × 16 cm
Gewicht	22 g laut Website
Pflege	Waschen gemäß Etikett; trocknergeeignet

Grembiule • wasserdichte Schürze

Schürze mit Kool-Knit-Barriere zum Schutz der Kleidung. Die Website führt sie als separates Pflegezubehör für Einrichtungen.



Angabe	Ausführung
Größe	90 × 105 cm
Gewicht	257 g
Waschen	Bis 30 °C
Bügeln	Niedrige Temperatur
Chemische Reinigung	Nicht zulässig

Die Schürze nicht mit dem 90–95-°C-Programm für Unterlagen waschen: Der angegebene Höchstwert beträgt 30 °C.


Scivola Gleitlaken

Für horizontale Bewegungen; nicht zum Anheben geeignet.



Angabe	Scivola
Artikelnummer	HIP A24V1
Hersteller-Maßangabe	100 × 100 / 200 cm, einschließlich Flügel
Gewicht laut Website	345 g
Waschen	Bis 60 °C
Pflege	Keine Chlorbleiche; mittlere Trocknungstemperatur

Darstellung: Bewegungsrichtung

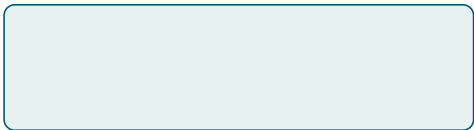

Horizontale Bewegung



Keine Hebehilfe

Verwendung durch geschultes Personal gemäß Herstelleranleitung und dem Mobilisationskonzept der Einrichtung.

Sammel- und Netzwaschsäcke

Transport, Trennung und personenbezogene Textilzuordnung.



Ulisse • 100 % Polyester

Netzwaschsack

Ulisse Artikel	Größe (cm)	Boden (cm)
ASU05... STANDARD	75 × 95*	27 × 47
ASU06... LARGE	78 × 110	30 × 50
ASU07... SMALL	50 × 70	Gerader Boden; ohne Griffe

* Das frühere Herstellerdatenblatt nennt 75 × 95 cm, die HIP-Website 75 × 90 cm. Die Höhe von STANDARD wird vor der Bestellung abgestimmt.

Netzausführungen und Zubehör

ASR30LAMPO: 30 × 40 cm, mit Reißverschluss und einer Etikettenfläche von 10 × 6 cm. Weitere Datenblattgrößen: 40 × 50, 50 × 70, 60 × 90, 75 × 100, 100 × 120 und 130 × 150 cm. Farben, Verschlüsse und RFID-Vorbereitung auf Anfrage.

Ulisse: sieben Farben, individuelles Emblem auf Anfrage. STANDARD und LARGE mit Griffen. Die Website nennt für den Netzsack maximal 60 °C; keine Chlorbleiche.

Wasserlöslicher Sack und Stella Wagen

Sackgestütztes Textilmanagement direkt am Sammelort.



Wasserlöslicher Sack

Sack aus Polyvinylalkohol, 66 × 84 cm. Die HIP-Website zeigt eine kaltwasserlösliche Variante ab 25 °C. Der Sack muss zum gewählten Waschverfahren passen.

Angabe	Ausführung
Kaltwasservariante	ASS05F66X84; 25 °C; blaues Verschlussband
Warmwasservariante	ASS0566X84; 65 °C; rotes Verschlussband
Verpackung	25 Stück / Rolle; 200 Stück / Karton
Dicke	20 µm laut früherer Produktangabe

Stella Sackwagen



Varianten für ein bis vier Sackplätze. Weißer schlagfester Kunststoff, verzinkter Stahl und Leichtmetallteile; schwenkbare Gummirollen.

Angabe	Ausführung
1 Sackplatz	390 × 410 × 880 mm
4 Sackplätze	1575 × 410 × 880 mm
Rolle	Ø 75 mm
Zwischenvarianten	Größe und Artikelnummer abstimmen

Die Waschmaschine bei wasserlöslichen Säcken nicht überladen: Für das korrekte Auflösen des Films sind freie Bewegung und ausreichender Wasserkontakt nötig. 25 und 65 °C bezeichnen zwei unterschiedliche Varianten und sind nicht austauschbar.

Wasch- und Pflegeübersicht

Das Produktetikett und die konkreten Herstellervorgaben haben immer Vorrang.

Produkt	Waschen max.	Chlorbleiche	Weitere Vorgaben
Unter- / Oberlaken	60 °C	Gemäß Herstellervorgaben zulässig	Mittlere Trocknung; kein Bügeln
Kissenbezug	Gemäß Etikett	Gemäß Etikett	Trockner; gemäß Etikett
PU-Matratzen- / Kissenschutz	95 °C	Vermeiden / verboten	Sauerstoffmittel; Trocknung gemäß Etikett
LX-2016, BB-1, Big Blue	95 °C	Vermeiden	Sauerstoffmittel; Empfehlung pH < 10
Flat	95 °C	Nein	Trockner; kein Bügeln
04190 NF	90 °C	Gemäß Herstellervorgaben zulässig	Max. 40–50 °C; 15–20 Min. trocknen
LX-2016 für Sitzflächen	90 °C	Nein	Mittel auf Sauerstoffbasis
Picasso / Picasso mit Tasche	60 °C	Nein	Max. 40–50 °C; 15–20 Min. trocknen
Oceano / Mikrofrottee, auch mit Tasche	60 °C	Gemäß Herstellervorgaben zulässig	Max. 40–50 °C; 15–20 Min. trocknen
ThermoCare / ThermoQuilt	Gemäß Etikett	Gemäß Etikett	Trocknen max. 60 °C; kein Bügeln
Waschhandschuh	Gemäß Etikett	Gemäß Etikett	Trockner; gemäß Etikett
Grembiule Schürze	30 °C	Gemäß Etikett	Niedrige Bügeltemperatur; keine chemische Reinigung
Scivola	60 °C	Nein	Möglichst mittlere Trocknung
Ulisse / Netzsack	Synthetikprogramm / 60 °C	Netzsack: nein	Gemäß Etikett der Variante

Eine maximale Waschtemperatur allein beschreibt kein Desinfektionsverfahren. Temperatur, Zeit, Chemikalien und Trocknung sind gemeinsam nach der örtlichen Hygiene- und Wäschereitechnologie festzulegen.

Aluminium-Wäschewagen

Ausführungen mit festem Boden und mit Federboden.



GTD • Fester Boden



GEC • Federboden

Modell	Innenmaße (mm)	Außenmaße (mm)
GH23 • fest	1020 × 620 × 582	1050 × 650 × 770
GH06 • fest	1250 × 700 × 600	1280 × 730 × 795
GH24 • Federboden	949 × 442 × 524	1060 × 480 × 800
GH26 • Federboden	1355 × 730 × 525	1460 × 760 × 800


Unterschiede der Ausführungen

- Eloxiertes Leichtmetall, blaues oberes Gummi-/PVC-Stoßprofil; Rollen Ø 125 mm.
- Fester Boden: zwei Bock- und zwei Lenkrollen in rautenförmiger 1-2-1-Anordnung; Rollen an die Ecken versetzbar.
- Federboden: vier Lenkrollen an den Ecken mit fester Position. Herausnehmbare, waschbare Aluminiumwanne.
- Hersteller-Federkraft: GH24 25 kg; GH26 50 kg. Keine bestätigte maximale Tragfähigkeit.

GH06: Aus den Innenmaßen berechnetes geometrisches Volumen ca. 525 Liter; kein bestätigtes Nutzvolumen.
 Maßfolge: Länge × Breite × Höhe.

Rollcontainer für Wäschereien

Verzinkte Drahtkonstruktion mit Standard- oder engmaschigem Gitter.

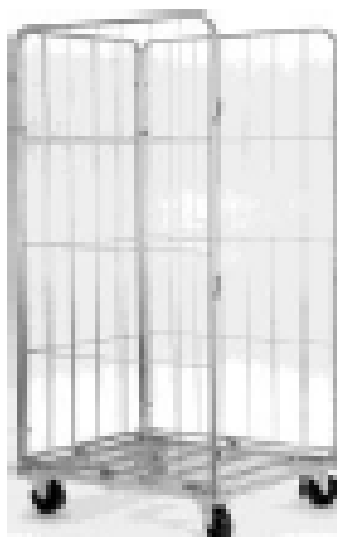

NF-174 • Standard



NF-174 • Vierseitig



NF-176 • 50 x 50 mm

Artikelnummer	Ausführung	Außenmaße (mm)	Traglast / Rolle
ARA01ST	NF-174	720 x 800 x 1560	500 kg / Ø125
ARA02ST	NF-174	720 x 800 x 1800	500 kg / Ø125
ARA03	NF-174	600 x 740 x 1560	250 kg / Ø100
ARA26RG	NF-174, vierseitig	500 x 800 x 1800	Ø125; Gummi
ARA02ST5050	NF-176	720 x 800 x 1800	Ø125
ARA035050	NF-176	600 x 740 x 1560	Ø125
ARA125050	NF-176	500 x 800 x 1800	Ø100

Bestell- und Auswahlhinweise

NF-174 Standard: mindestens 5 Stück; zwei Bock- und zwei Lenkrollen aus Polypropylen. ARA26RG: verschraubt, vierseitig, mit Gummirollen; projektbezogen ab 50 Stück. NF-176: verschraubt, engmaschig; auf Anfrage ab 30 Stück. Gummirollen und Zubehör je nach Modell.

Rollcontainer-Zubehör

Der Wagen wird an Sammlung, Kennzeichnung und Transportaufgabe angepasst.

Zubehör für NF-174 / NF-176

- Klappbare vierte Seitenwand; oberer Teil bei Bedarf als Ablage verwendbar.
- Passende Ablage; für NF-176 eine 40 cm hohe untere Frontwand.
- Sicherungsgurt (ARD), elastisches Verschlussband (ARD01), hinterer Stoßschutz (ARPARAURTI01).
- Transparenter Dokumentenhalter (PORTACARTEL04); Gummirollen (ARD03) und Ersatzrollen.



Bezüge

Variante	Ausführung / Größe
Ulisse TEX-C Innenbezug	100 % Polyester, Moltonverstärkung; für Wagen 720 × 800 × 1560 / 1800 oder 600 × 740 × 1560 mm
ZIP-COVER Innenbezug	Moltonverstärkung und Reißverschluss; für Wagen 720 × 800 × 1800 mm
Ulisse TEX-C Außenbezug	100 % Polyester, vorn Magnetverschluss; Standard- und Sondermaße auf Anfrage
X6 Innenbezug	Reißverschluss, 6 Kunststoffhaken; 720 × 800 × 1800 oder 600 × 740 × 1560 mm; Auslaufmodell

Individuelles Emblem und Mindestmenge

Mindestmenge für Bezüge: 12 Stück. Ulisse Embleme: mindestens 100 Stück; maximal 21 × 30 cm. Sublimation oder Duraflex; Duraflex eignet sich nicht für aggressive Waschverfahren. Bestimmtes NF-176 Zubehör ist ab 30 Stück erhältlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit werden abgestimmt.

Angebot und technische Abstimmung

Der Katalog enthält keine Preise; das Angebot richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf der Einrichtung.

Diese Angaben benötigen wir

- Produktname oder Artikelnummer mit genauer Ausführung.
- Matratzen- / Kissengröße, Flügel, Verschluss, Tasche, Farbe oder Wagenausstattung.
- Stückzahl und Lieferadresse; bei Emblemen die Grafik.
- Waschtemperatur, Chemikalien und Trocknungsverfahren.

Datenblatt, Etikett und Zertifikate

Artikelnummerfamilien sind nicht immer vollständige Bestellnummern: Farbe und Ausführung können weitere Kennzeichen erfordern. Zeichnungen sind schematisch, Fotos Herstellerabbildungen. Bestand, Lieferzeit, Mindestmenge und Sondermaße werden im Angebot bestätigt.

Die Produkte unterstützen Pflege und Textilmanagement. Ihre Verwendung ist an die fachlichen und hygienischen Abläufe der Einrichtung anzupassen.

Besprechen wir den Bedarf Ihrer Einrichtung.

Jedes Textil zählt.



Weinem Kft.

HIP Bettsystem, Schutztextilien und Wäschereizubehör
für soziale und Pflegeeinrichtungen.

info@wnkft.hu

www.wnkft.hu

+36 70 318 8411

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

HIP: Produktfamilie von Nuova Folati SpA
Vertrieb in Ungarn: Weinem Kft.



© 2026 Weinem Kft. Die Gestaltung und die deutsche Textfassung dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte an Produktfotos und Herstellerillustrationen liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern. Die Nutzung der Texte, Bilder und Abbildungen dieses Katalogs bedarf, über die gesetzlich zulässigen Fälle hinaus, der Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers.